

# PRACTICO™

Tavolo operatorio manuale

Per la chirurgia generale  
e interventi specialistici

SALA OPERATORIA



## Un'ampia varietà di configurazioni per diversi interventi chirurgici

Il nuovo modello Practico di tipo idraulico è un tavolo operatorio manuale versatile che consente un'ampia varietà di configurazioni adatte alla chirurgia generale e specialistica, anche in mancanza di elettricità.

Grazie al design e alle diverse regolazioni del tavolo operatorio è possibile avere un accesso diretto alla zona operatoria e operare anche pazienti di corporatura maggiore.

Inoltre, il piano antiruggine rende il tavolo utilizzabile anche in ambienti umidi.

Anti  
Trendelenburg



## Caratteristiche



Trendelenburg





Angolo convesso



Angolo concavo



Tilt laterale assistito da pistone

## Tanti vantaggi per lo staff chirurgico

- Accesso diretto al paziente
- Versatile – lo stesso tavolo è utilizzabile in molteplici tipologie di interventi
- Preparazione più veloce grazie alla facilità di configurazione
- Compatibile con molti accessori e sezioni del piano del tavolo appartenenti ad altri tavoli Merivaara (Practico elettromeccanico e Promerix)
- Radiotrasparente e compatibile con arco a C
- Adatto anche in ambienti umidi grazie al materiale resistente alla corrosione

## Caratteristiche

Sezioni gambe  
divise (opzionale)



Poggia piedi leggero utile durante il  
posizionamento (opzionale)



Regolazione idraulica dell'altezza

# Posizionamento del paziente



Posizione laterale con sollevamento dei reni per gli interventi a rene e torace.



Posizione laterale per chirurgia generale senza sollevamento dei reni.



Modalità "Reverse" per chirurgia generale o ORL



Posizione supina per chirurgia generale

## Posizionamento del paziente



Posizione per litotomia con gambali e supporto gambe, ad esempio per chirurgia ginecologica e urologica



Posizione per litotomia con sezione gambe divisa, ad esempio per chirurgia laparoscopica e bariatrica



Dispositivo di trazione 19300 per chirurgia ortopedica

Esclusivo di  
Merivaara!



Sezioni facilmente rimovibili grazie al meccanismo di aggancio/sgancio rapido.

## Specifiche Tecniche

Safe working load	180 kg
Range di regolazione dell'altezza (senza materasso)	710 – 1020 mm
Guide laterali	UE, UK, US

### REGOLAZIONI

Altezza	Idraulica
Sezione gambe e schiena, tilt laterale e Trendelenburg	Meccanica, assistita da pistone

### USO IN MODALITA' NORMALE

Trendelenburg	25°
Anti-Trendelenburg	18°
Tilt laterale	± 20°
Regolazione della sezione schiena	- 30°...+70°
Regolazione della sezione gambe	- 90°...+15°

### USO IN MODALITA' REVERSE

Trendelenburg	18°
Anti-Trendelenburg	25°
Tilt laterale	± 20°
Regolazione della sezione schiena	N/A
Regolazione della sezione gambe	N/A



Disponibile con materassi VEF o IS

- EN 60601-1, EN 60601-2-46 (se applicabile)
- Pratico manuale è classificato nella classe I in base alla Direttiva del Consiglio Europeo; Direttiva 93/42/EEC Classe I (Articolo IX)

CE


# Soluzioni per un flusso pazienti efficiente e per il loro benessere

Merivaara fornisce una vasta gamma di attrezzature e arredi ospedalieri come tavoli operatori, lampade scialitiche, lettini da visita, barelle per trasporto e day-hospital, nonché letti parto e degenza. Inoltre, i nostri nuovi concetti includono sia i rivoluzionari sistemi di gestione integrata, sia i servizi post vendita.

Le nostre soluzioni e i nostri prodotti versatili permettono che il flusso fisico dei pazienti in ospedale, negli ambulatori e nelle cliniche, così come nelle case di riposo e nelle assistenze domiciliari, sia efficiente e conveniente. La nostra priorità è promuovere il comfort e il benessere, sia dei pazienti che dello staff medico.

Fondata nel 1901, Merivaara ha più di 100 anni di esperienza nella progettazione e produzione di attrezzature e arredi ospedalieri. Oggi, i nostri prodotti sono molto apprezzati dagli utenti in più di 120 paesi, grazie alla facilità d'uso, alla resistenza e al design ergonomico.

I prodotti medicali Merivaara sono marcati CE e il sistema di gestione qualità della società è conforme alle direttive europee per i dispositivi medici. E' certificata dall'ente DNV secondo gli standard 9001:2008 E ISO 13485:2003. Il sistema della gestione ambientale della società è certificato ISO 14001:2004.

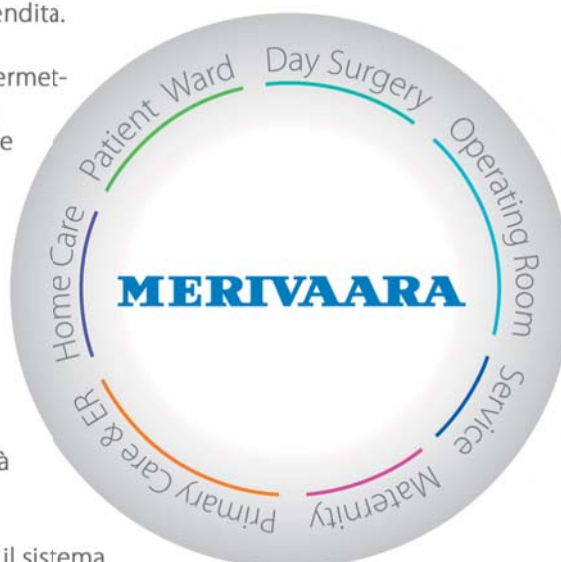

**Merivaara Corp.**  
Puustellintie 2, FI-15150 Lahti, FINLAND  
Tel. +358 3 3394 611, fax +358 3 3394 6144  
merivaara@merivaara.com  
www.merivaara.com

Distributore esclusivo per l'Italia:

Dimensione S.p.A.  
Via VIII Marzo, 8 - 10095 Grugliasco (TO)  
Tel: +39 011 40 66 111 Fax: +39 011 40 66 112  
E-mail: ospital@gruppodimensione.it

The status of the information, specifications and illustrations in this publication is indicated by the date of publication. Whilst the greatest care has been taken over its compilation, Merivaara Corp. is not responsible for any errors or omissions. Merivaara Corp. reserves the right to make changes to the technology, features, specifications and design of the equipment and models without notice. Please check the Merivaara website for the latest updated specifications and other information.

All trademarks are Merivaara property unless otherwise stated. Patents granted or pending.